


SECUTAPE®

SECUTAPE 
1986 - 2016 
Jahre

Systeme de fixation

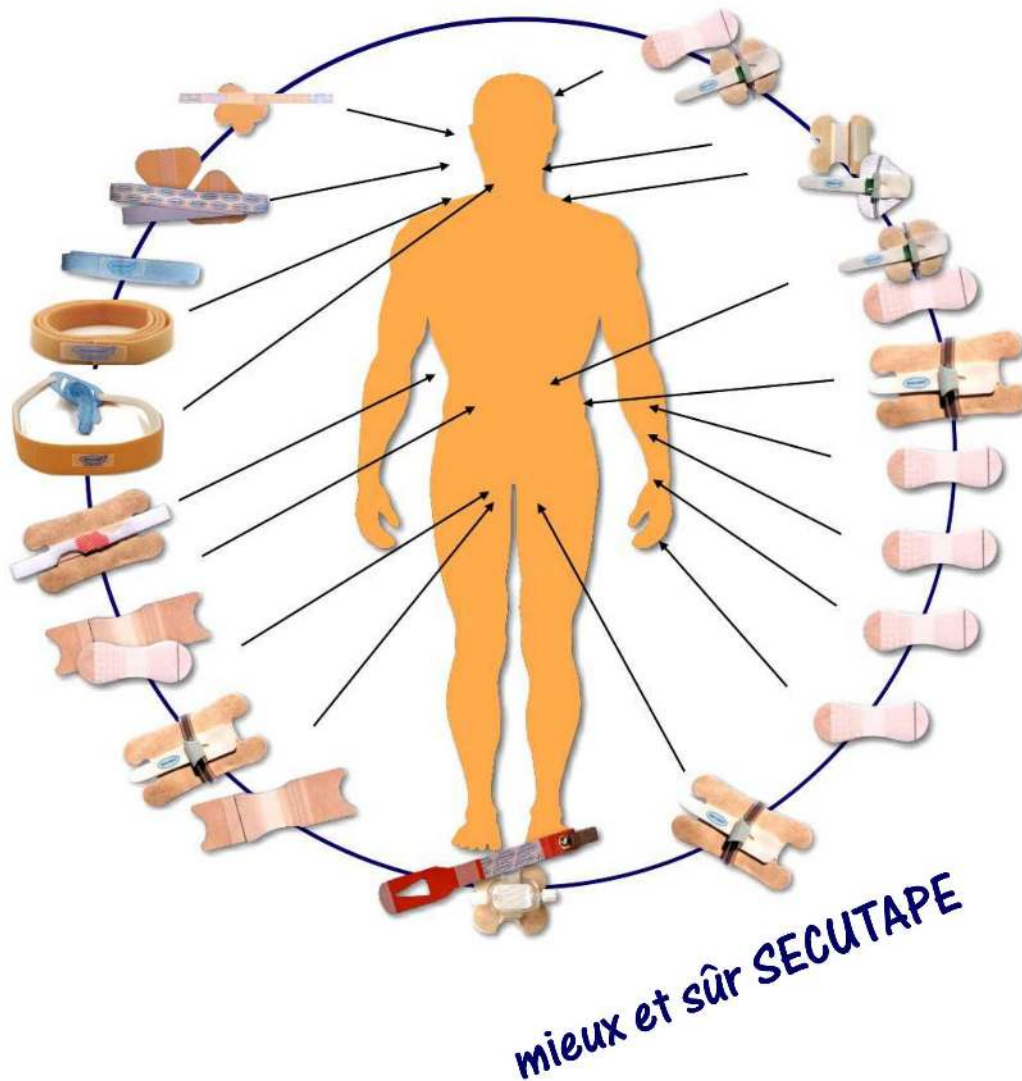

mieux et sûr SECUTAPE

CATALOGUE

Nous offrons formations gratuites de produits!



TechniMed AG

SWITZERLAND since 1987

fon 0041 / 71 844 49 20

Kirchstrasse 54

CH-9400 Rorschach

fax 0041 / 71 845 52 45

Germany

fon 0800 007 9892

fax 0800 941 3012

Austria

fon 01/ 440 7979

fax 01/ 440 7990

CE

Made in Germany

www.secutape.ch

Copyright by TechniMed AG

mail: info@technimed.ch

SECUTAPE®

Le principe SECUTAPE

Le support de base colle complètement à la peau. Il n'y pas d'angulaire partiellement décollée!


Le tube est posé sur le point collant. Une languette velcro empêche l'ouverture!

Les mouvements du tube sont transférés sur tout le support via la languette. La fixation tient parfaitement!

Toutes les fixations SECUTAPE travaillent sur le même principe.

Chez toutes les fixations, le tube peut être enlevé de la languette velcro et de nouveau remis sûr!

Ce principe a été patenté en 1986!

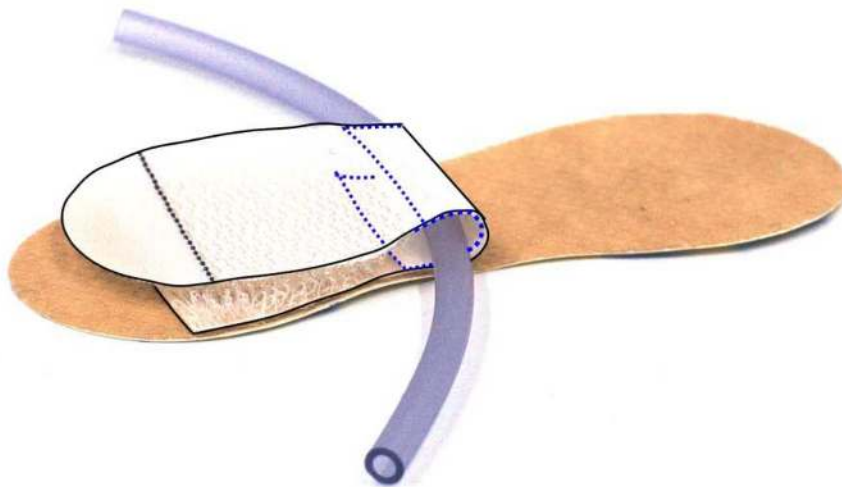

Made in:

Nous attachons une grande importance à une bonne qualité de nos produits fabriqués entièrement en Allemagne.

Les adhésifs et silicones proviennent de la Suisse. Les fermetures velcro sont faites en Allemagne et en Suisse - spécialement pour notre maison - selon nos spécifications. Elles sont tissées ou tricotées de fils de haute qualité.

Contrairement aux produits étrangers ils ne contiennent pas de solvants.


Nos Tapes proviennent de l'Allemagne et des Etats-Unis; l'Hydrocolloïde du Royaume-Uni. Tous les matériaux utilisés sont hypoallergéniques et med sûr.

Seulement en utilisant des matériaux de haute qualité nous arrivons à la force de maintien incroyable de nos fixations.

Bonne qualité ne peut pas être pas cher..

Au cours de la période d'utilisation nos fixations doivent être considérées comme favorables. Elles tiennent mieux, ne causent pas de dommages à la peau et peuvent rester plus longtemps au patient.

**Prenez nous au mot et testez nos produits !
Dans l'UE nous livrons de l'entrepôt Allemagne.**

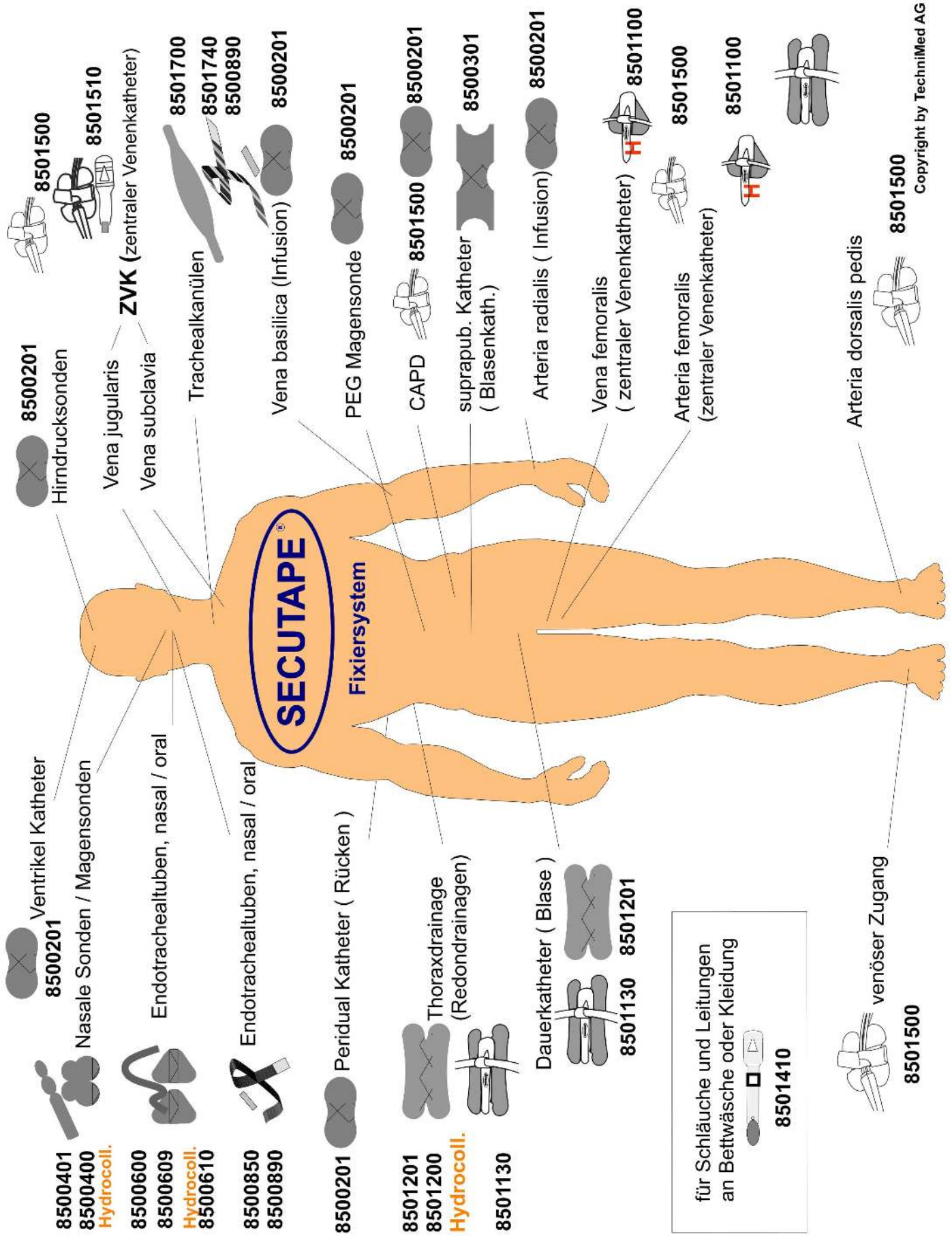

SECUTAPE[®] fixations peuvent en règle rester au patient pendant plusieurs jours et offrir la plus grande sécurité possible dans les circonstances



Originalgrösse





Tailles 2 / 2+ / 3+ Fixations standards

Pour plus de 25 ans des millions de fois éprouvés

Fixation très sûre fabriquée en non-tissé respirant et doux pour la peau.

Application facile et tient même **si elle est mouillée**, p.ex. durant la douche du patient.
Fixation spécialement pour:

PEG, CAPD, ZVK, cathéters suprapub, infusions, cathéters vessie, drainages redon, ports, drainages de blessure, sondes pour mesurage de la pression et tous les autres tubes.

Indication:

Art. No 8500200 colle mieux sur les bandages,
Art. No 8500201 tient mieux sur la peau!



	Art. No 8500200	1 emb. à 200 p.
	emball. séparé.	8 sacs à 25 p.
	Art. No 8500210	1 emb. à 1000 p.
		20 sacs à 50 p.

	Art. No 8500201	1 emb. à 200 p.
	emball. séparé.	8 sacs à 25 p.
	Art. No 8500211	1 emb. à 1000 p.
		20 sacs à 50 p.

	Art. No 8500301	1 emb. à 200 p.
	emball. séparé.	8 sacs à 25 p.
	Art. No 8500311	1 emb. à 1000 p.
		20 sacs à 50 p.

Durée d'utilisation:
environ 4 - 5 jours



Originalgrösse



SECUTAPE®

Système de fixation LIANT VELCRO

Les fixations de la prochaine génération!

Système universel pour toutes les
circonstances et pour tuyaux quelconques!

Le LIANT VELCRO tient le tube sûr **sans adhésif**
grâce au nouveau film **anti-glisse NANOPLAST®**
avec effet Gecko!

La fixation peut être **ouverte et refermée à tout moment**
sans laisser de résidu au tube. La fixation tient toujours
sûre!

Le Liant Velcro est disponible comme Set avec de différents
supports - **aussi en hydrocolloïde** - selon l'application.

Grâce au matériels de bonne qualité, respirants et doux pour
la peau, la fixation tient aussi si elle est **mouillée**, p.ex.
durant la **douche** du patient.

Le film **NANOPLAST®** est fait de silicone.
Il est donc particulièrement adapté pour
la fixation **de longue durée!**



Liant velcro


Art. No 8501000 emb.200 p.
emball.séparé 8 sacs à 25 p.



Liant velcro - Set PETIT

Hydrocolloïde

Art. No 85001100 emb.100 p.
emball.séparé 4 sacs à 25 p.

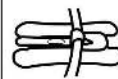

Liant velcro - Set GRAND


Art. No 8501130 emb.100 p.

emball.séparé 4 sacs à 25 p.

Durée d'utilisation:

environ 3 jours

Hydrocolloïde: - 6 jours

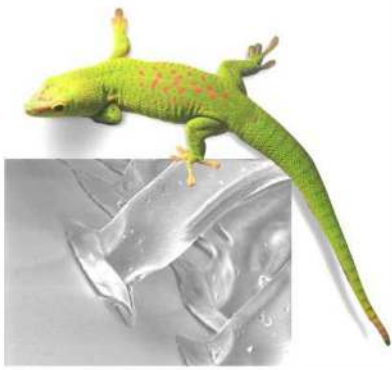

Gecko
tient[®]
pat. Wetherholt




CE

Made in Germany

www.secutape.ch



Originalgrösse

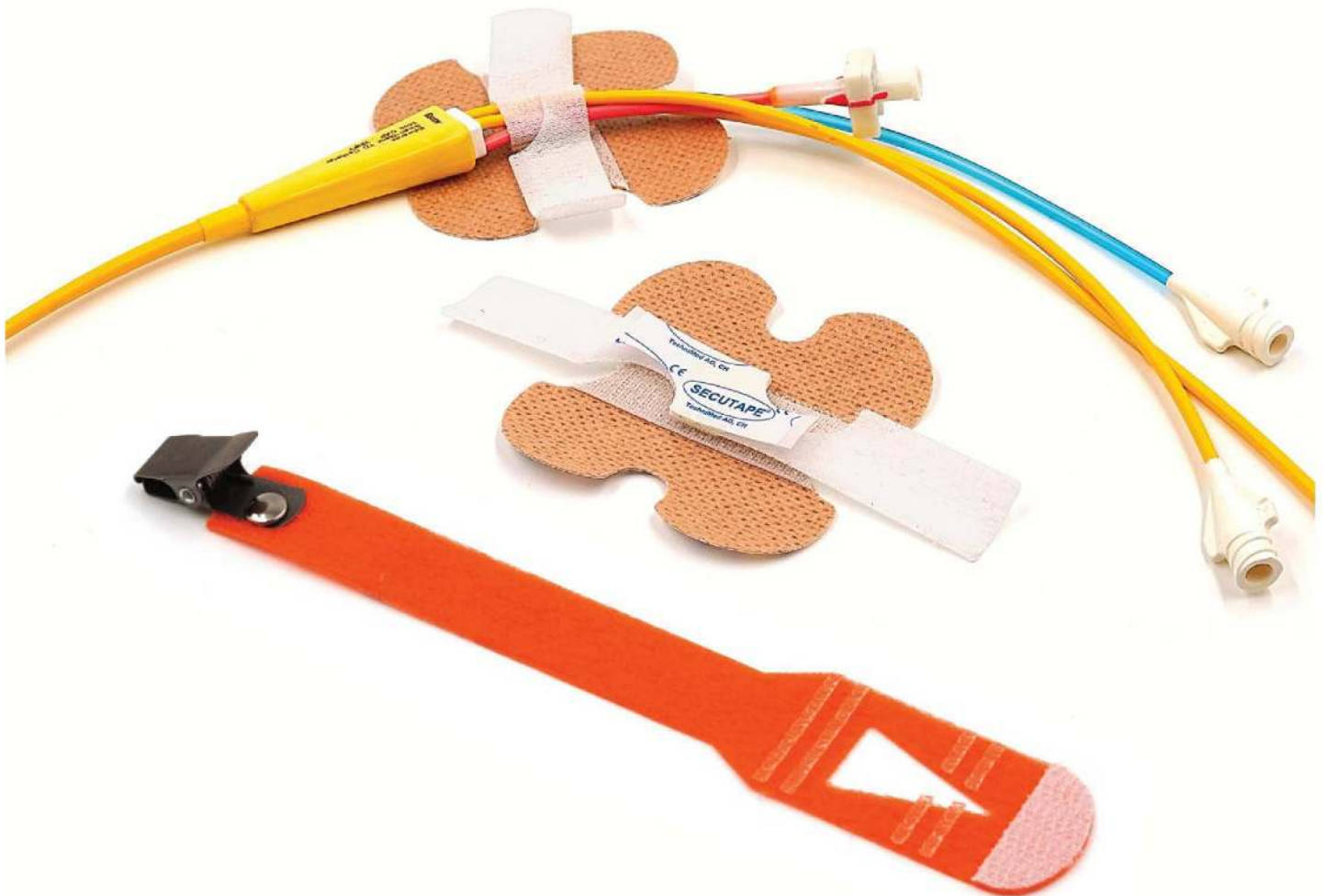



Unifix

Pour fixation de tubes et drainages spécialement de ZVK!!

UNIFIX en deux parties est idéal pour **fixation sûre** de fins cathéters, sondes et drainages, p.ex. de multiple cathéters veineux central. p.ex. de multiple ZVK..

La base est une toison **respiratoire et douce pour la peau** tenant bien même si elle est mouillée p.ex. pendant la douche du patient.

Le cathéter est maintenu solidement sur un adhésif avec une fermeture velcro.



Set Fixation ZVK

Le set se compose d'un UNIFIX et d'un KROKOFIX, un support flexible antidérapant, qui est utilisé comme relâchement supplémentaire attaché aux vêtements ou à la literie

Ainsi, la traction et les mouvements au ZVK sont réduites, ce qui contribue à prévenir l'inflammation.




Unifix
Art. No 8501500 1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p.
emball.séparé

Set Fixation ZVK
Art. No 8501510 1 emb. 100 p.
8 sacs à 25 p.
emball.séparé

**Durée d'utilisation:
environ 3 - 6 jours**

UNIFIX peut aussi être utilisé pour fixer solidement aux corps de **petites pièces** telles que **filtres**, des **transducer** ou autres.


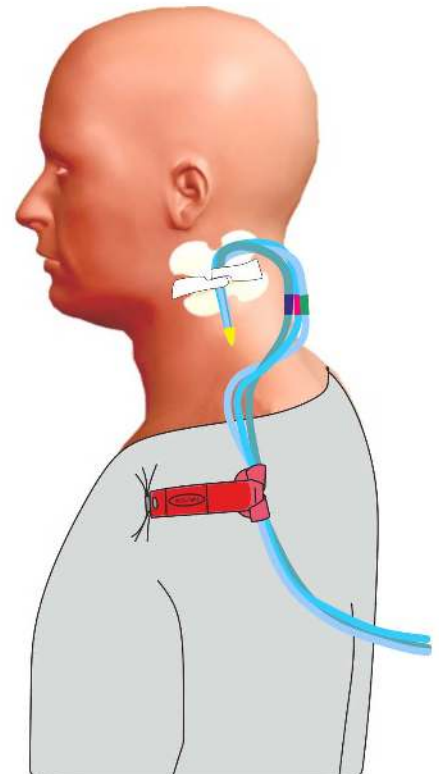


CE

Made in Germany
www.secutable.ch



Originalgrösse

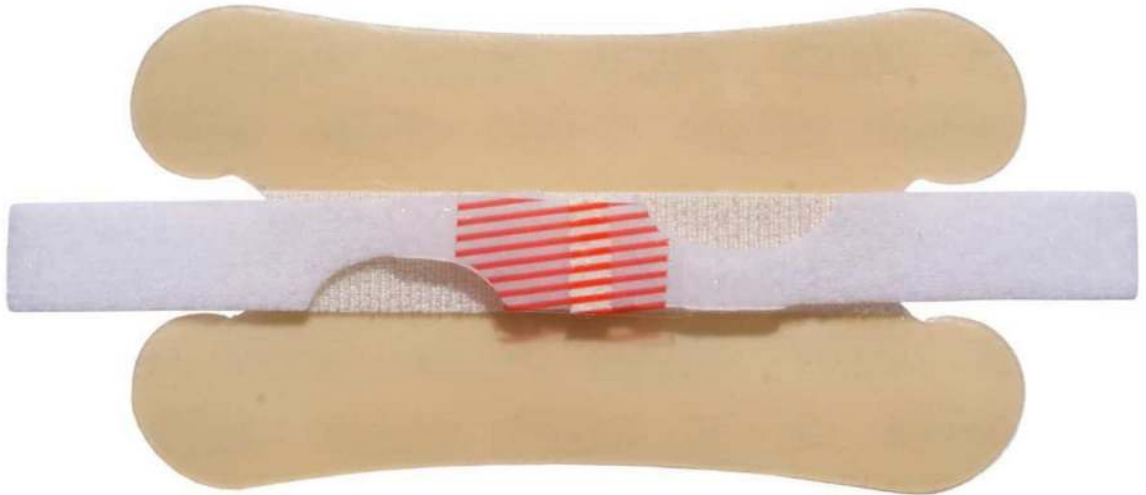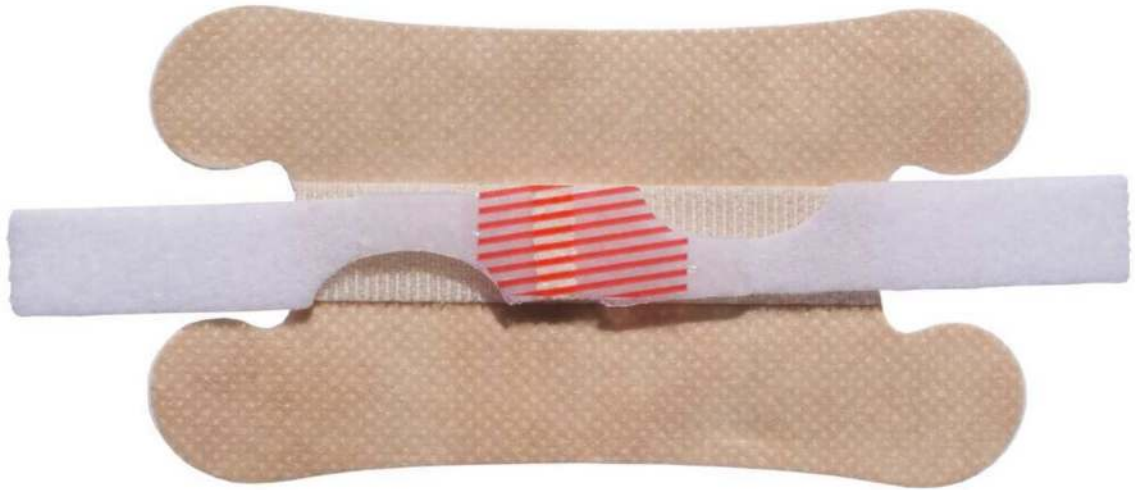




Set de fixation pour grande lumina

Notre meilleure fixation fixatrice pour tubes épais.

Fixation très sûre fabriquée de non-tissé ou hydrocolloïde **respirant** et **doux pour la peau**. La Fixation tient même si elle est mouillée, p.ex. durant la douche du patient.

Le pansement dispose d'un **revêtement anti-dérapant** spécial que, contrairement all'adhésif, tient solidement bien les tubes de silicone !


La fixation est appropriée spécialement aux drainages thoraciques, ECMO, drainages de rincer et similaire.

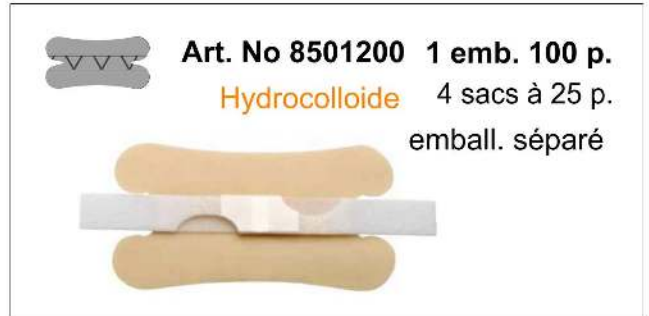

Durée d'utilisation:
environ 4 jours;
Hydrocolloïde 6 jours.



Originalgrösse

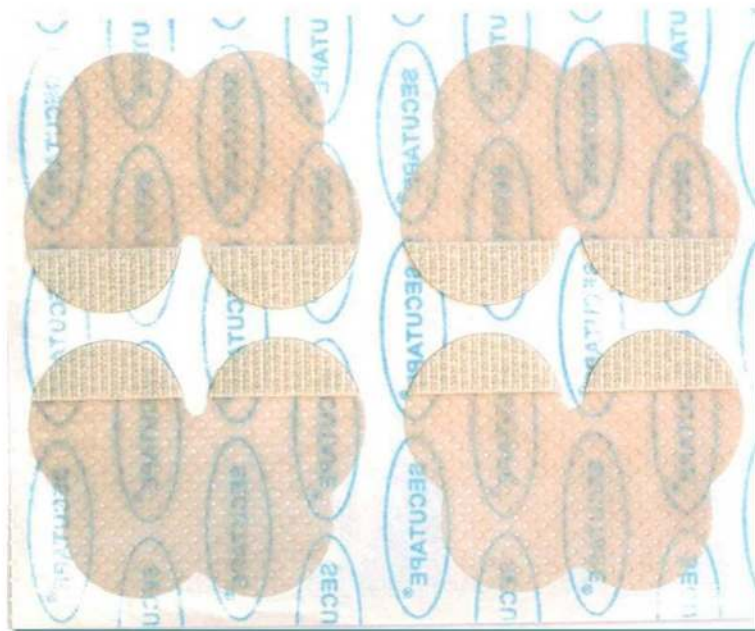

Fixation en deux parties brevetée pour toutes les sondes nasal.

Constitué d'un **support de fixation** en tissu polaire respirant et doux pour la peau, spéc. formé de manière ergonomique.


Ainsi qu'une **bandelette** avec fermeture à velcro et surface adhésive.

Le support reste sur le nez. Si nécessaire, seule la bandelette est changée.

Il n'y a **pas de lésions cutanées.**
Il n'y a **pas besoin de soins de la peau** qui prennent du temps !

En raison de la fixation par velcro, la sonde peut être fixée sans attacher, le résultat est pas de points de pression sur le nez.

La fixation tient même si elle est mouillée.
Par exemple, lorsque le patient est lavé.

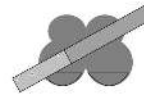


Art. No 8500400
Hydrocolloïde

1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p.
emb. séparé



Set

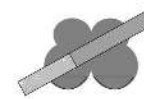

Art. No. 8500401
Non-tissé

1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p.
emb. séparé



Set



Art. No 8500410

1 emb. 400 p.
Cartes à 4 p.
emb. séparé



Art. No 8500440

1 emb. 500 p.
Cartes à 5 p.
emb. séparé



Durée d'utilisation:
environ 2-3 jours.
Hydrocolloïde: jusqu'à
5 jours.



Originalgrösse



SECUTAPE®

Set de fixation pour tubes endotrachéaux oral & nasal

Pour plus de 25 ans des millions de fois éprouvés
Set original fixation pour tubes endotrachéaux!

Deux pansements fabriqués en non-tissé ou hydrocolloïde très sûrs et doux pour la peau, avec velcro.

Une **bande de nylon** hypoallergénique **n'absorbant pas l'humidité** et qu'au centre est affiché par un adhésif spécial.

L'adhésif n'attaque pas les plastiques

Ce système permet une **aspiration sûre et simple**.
Très facile et sûr à utiliser et **avantageux** grâce à une longue durée!

Le ruban standard est **pelucheux d'un côté**.
La bande souple est **pelucheuse des deux côtés**, qui permet de prévenir des dommages cutanés.



Art. No 8500609 1 emb. 100 p.
Hydrocolloïde 4 sacs à 25 p.
emball. séparé

Set



Art. No 8500600 1 emb. 200 p.
Non-tissé 8 sacs à 25 p.
emball. séparé

Set



Art. No 8500709 1 emb. 200 p.
Hydrocolloïde 8 sacs à 25 p.
emball. séparé



Art. No 8500800 1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p.
emball. séparé



NOUVEAU

Ruban doux
Art. No 8500805 1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p.
emball. séparé



Art. No 8500700 1 emb. 200 p.
8 sacs à 25 p.
emball. séparé

deux pièces

Durée d'utilisation:
environ 4 jours;
Hydrocolloïde 6 jours.

CE
Made in Germany
www.secutable.ch



Originalgrösse

Band 40 cm





Set de fixation pour tubes endotrachéaux oral / nasal

Set de fixation EXTRA

Notre Set de fixation prouvé avec bande nouvelle!

Deux supports de toison **bien adhérents** et **doux pour la peau** ou bien en hydrocolloïde avec velcro.


Bande nouvellement développée, **entaillée**, double face, moelleuse nylon, hypoallergénique.

Elle se laisse **positionner mieux et plus exacte grâce à la fissure**

Elle **n'absorbe pas l'humidité** et **ne s'étend pas**.

Elle est fixée au tube par une bande velcro **de haute technologie**.
Lorsqu'on l'enlève, il **ne reste pas d'adhésif** sur le tube.

Une fixation sûre avec un long temps de rétention,
facile dans l'application

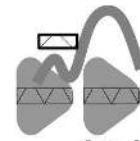


Set Fixation EXTRA

pour tubes endotrachéaux

Art. No 8500610 1 emb. à 200 p.
emb. séparé 8 sacs à 25 p.

Les deux composants sont
disponibles séparément.

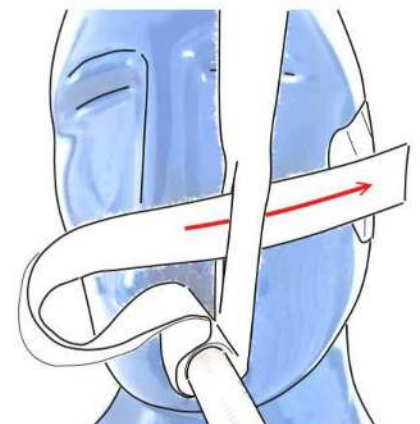

**Durée d'utilisation:
environ 4 jours**

SECUTAPE® Fixations peuvent rester quelques jours au patient !!

CE
Made in Germany
www.secutape.ch



Länge 37 cm



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3Tage
Hydrocolloid - 6 Tage



Made in Germany
www.secutape.ch



Bande de fixation à court terme auto-adhésive pour tubes endotrachéaux

Bande de fixation à court terme pour tubes endotrachéaux

Nouvellement développée, de haute qualité, **auto-adhésive**, spécialement conçue pour l'anesthésie.

La bande adhésive colle parfaitement et est résistante **à la déchirure et elle ne s'étire pas.**

Emballée de manière hygiénique dans une boîte distributrice, elle est facile à manipuler grâce à sa forme et à son papier de couverture spécialement perforé.

Les boîtes sont perforées et peuvent être ouvertes à l'avant pour faciliter le retrait et le stockage.



Fixation à court terme pour tubes endotrachéaux

Art. No 8500820 **400 pcs**
Boîtes à 100 pièces


Art. No 8500821 **2000 pcs**
Boîtes à 100 pièces



**La bande ne remplace pas
la fixation correcte à long
terme**



SECUTAPE®

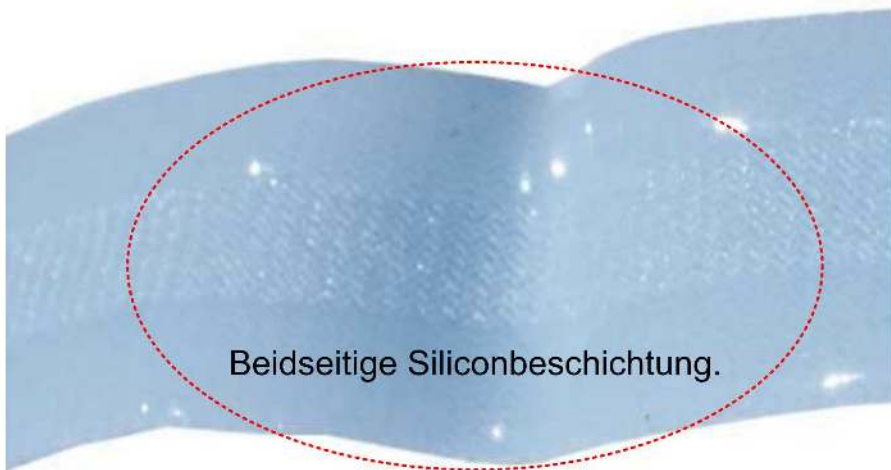

Beidseitige Siliconbeschichtung.



Bande tubus

pour tubes endotrachéaux

SECUTAPE® Bande tubus SILICONE

Une bande brevetée, hypoallergénique, douce en Nylon. Elle **ne s'étire pas** et **n'absorbe aucun liquide**.

En raison du revêtement de **silicone** sur une face la bande n'a pas de bords durs et **ne glisse pas sur la peau**.

Il ne doit l'être, en raison de ses propriétés **ne pas être trop serré**.

Ceci et les propriétés hydrophobes de la bande prévenissent en grande partie les dommages cutanés .

Le ruban adhésif est fixé au tube par un velcro autocollant et peut être retiré en laissant aucun résidu.

Il est facile à appliquer et doit être essentiellement **échangé moins souvent** que les bandes conventionnelles.

La dernière technologie de velcro pour un soutien sûr.



Bande tubus

Art. No 8500850 1 emb. à 200 p.
emb. séparé. 8 sacs à 25 p.
Longueur 75 cm

Durée d'utilisation:
environ 1 - 2 jours





Länge 75 x 2cm



SECUTAPE®

Bande Universelle

Pour tubes endotrachéaux et trachéostoma

Bande nylon double face nouvellement développée.
Hypoallergénique et agréablement moelleuse.

La bande ne s'étend pas, **n'absorbe pas l'humidité**
et est **facile à garder propre.**

Elle doit donc être **changée beaucoup moins souvent**
que des bandes traditionnelles en mousse
ou textiles.

La bande ne doit pas être serrée et ainsi il y
aura **moins de dommages à la peau.**

Fixation très sûre, faible consommation, application facile

Une bande pour toutes les deux applications!



Durée d'utilisation:



CE

Made in Germany
www.secutape.ch

SECUTAPE®

Originalgrösse

Tracheofix
53 x 3.5 cm

Superflausch



Superabsorberpad

Masse 21 x 4.5 cm



CE

Made in Germany
www.secutable.ch



Tracheofix®

Fixation pour trachéostoma

Notre dernière bande nylon double face.
Hypoallergénique et agréablement moelleuse.

La bande **ne s'étent pas et elle reste sèche.**
Elle est facile à garder propre.

Elle doit donc être **changée beaucoup moins souvent** que des bandes traditionnelles en mousse ou textiles.

Adapté à la bande nous vendons un **Pad Superabsorbent** autorisé pour les applications médicales **auto-adhésif**.
Ainsi le col reste sec même chez les patients fortement transpirant.
Il n'y aura donc plus de peau endommagée.

Durée d'utilisation: jusqu'à environ 3 jours.
Avec Pad Superabsorbent jusqu'à 5 jours



Tracheofix

Standard


Art. No 8501700

Emball. séparé..

Longueur 53 cm

1 emball. 100 p.

8 sacs. à 25 p.

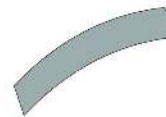

Pad Superabsorbent

Art. No 8501770

Emball. séparé..

Mesure 20 cm

1 emball. 200 p.

8 sacs. à 25 p.



CE

Made in Germany
www.secutape.ch



Länge 50 x 3 cm
Absorber 20 cm



CE
Made in Germany
www.secutape.ch

SECUTAPE®

Tracheofix Confort

Bande de fixation pour trachéostoma

Bande très douce, épaisse et moelleuse en Nylon, hydrophobe et hypoallergénique.


La bande en deux parties ne s'étire pas et reste sèche. Elle est simple à utiliser.

Fixer les deux parties à la canule comme d'habitude à l'aide des bandes velcro.

Placer la bande la plus longue autour du cou et, si nécessaire, ajuster la longueur excédentaire avec des ciseaux.

Fermer avec la bande la plus courte et la plaquette velcro SECUTAPE.

Attention: ne pas serrer, les bandes ne s'étendent pas.

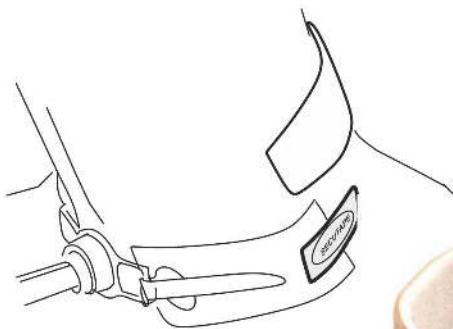

Tracheofix Confort

Longueur 50cm

Art. No 8501750

Emball. séparé 4 sacs à 25 pcs



Tracheofix Confort-Set avec Superabsorber



Longueur 45cm, Absorber 20 cm

Art. No 8501740 1 VE 100 Stk

Emball. séparé 4 sacs à 25 pcs



plus d'informations:

www.secutape-schulungen.ch

La bande peut rester au patient quelques jours!

Tracheofix Set Confort

Une bonne solution pour les patients souffrant de problèmes de peau ou lors de peau très sensible.

Le Pad autocollant inclus dans le set se compose d'un superabsorbent médical qui sert comme protection contre les lésions de la peau.

L'ensemble est une fixation idéale à long terme et particulièrement adapté aux soins à domicile.

CE

Made in Germany

www.secutape.ch

SECUTAPE®

Superflausch

PVC & LATEX FREI!

Fixierhalter zum Einsatz bei:

Tubing

Hand Art. 8500800

Art. 8501000

...örungen des Halters
nur mit Wasser und Seife reinigen!

Nicht sofort belasten!!

Hydrocolloid braucht Hauttemperatur um gut zu halten!

Weitere Informationen in
in unseren Anwendungs-
oder unter

www.secutape.com



CE

Made in Germany
www.secutape.ch

SECUTAPE®

Set de fixation pour ECMO

Support de tête réglable pour fixer une ECMO veino-artérielle

Le support de tête en nylon hypoallergénique est réglable à **toutes les tailles de tête**

Il est en relation à la bande de fixation et les supports hydrocolloïdes une **fixation très sûre** laissant au patient un certain degré de **liberté dans ces mouvements**

La fixation supplémentaire des tubes au cou **réduit le chargement** au point de sortie

Les Krokofix ci-inclus - fixés à la literie - servent au relâchement de traction des tubes



Set de fixation: ECMO

Art. No 8501610, emb. 10 sets



CE

Made in Germany
www.secutable.ch



Originalgrösse





Krokofix[®]

Pour la fixation de tubes quelconques aux vêtements ou à la lingerie

Fixation manuelle **anti-glisser** pour fixer tous les tubes.

Spécialement pour des patients mobiles ou **pour le relâchement de traction.**

Tout simplement attacher aux vêtements ou à la lingerie.

Krokofix est **réutilisable** et peut être désinfecté par des moyens classiques.

Krokofix **grand** peut être utilisé en tant que pour la fixation de **sacs à urine** normaux.



Krokofix grand

Art. No 8501420

1 emb. à 200 p.

8 sacs à 25 p.

23 cm




Krokofix petit

Art. No 8501410

1 emb. à 200 p.

8 sacs à 25 p.

16.5 cm

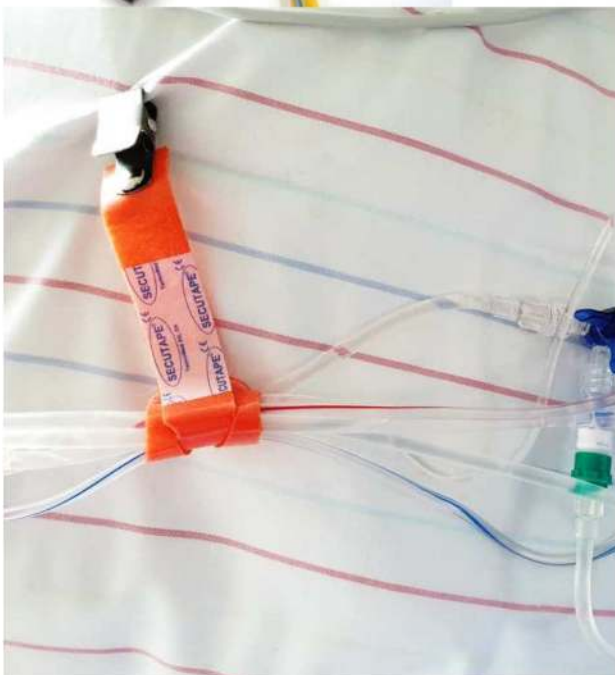

CE

Made in Germany
www.secutape.ch



**FIXIERUNG
FIXATION
FISSAGGIO**

mieux et sûr SECUTAPE



www.secutape.ch