


Auflage Sept. 2025



infocare
e-learning by TechniMed

FIXIERSYSTEM 
Since 1986

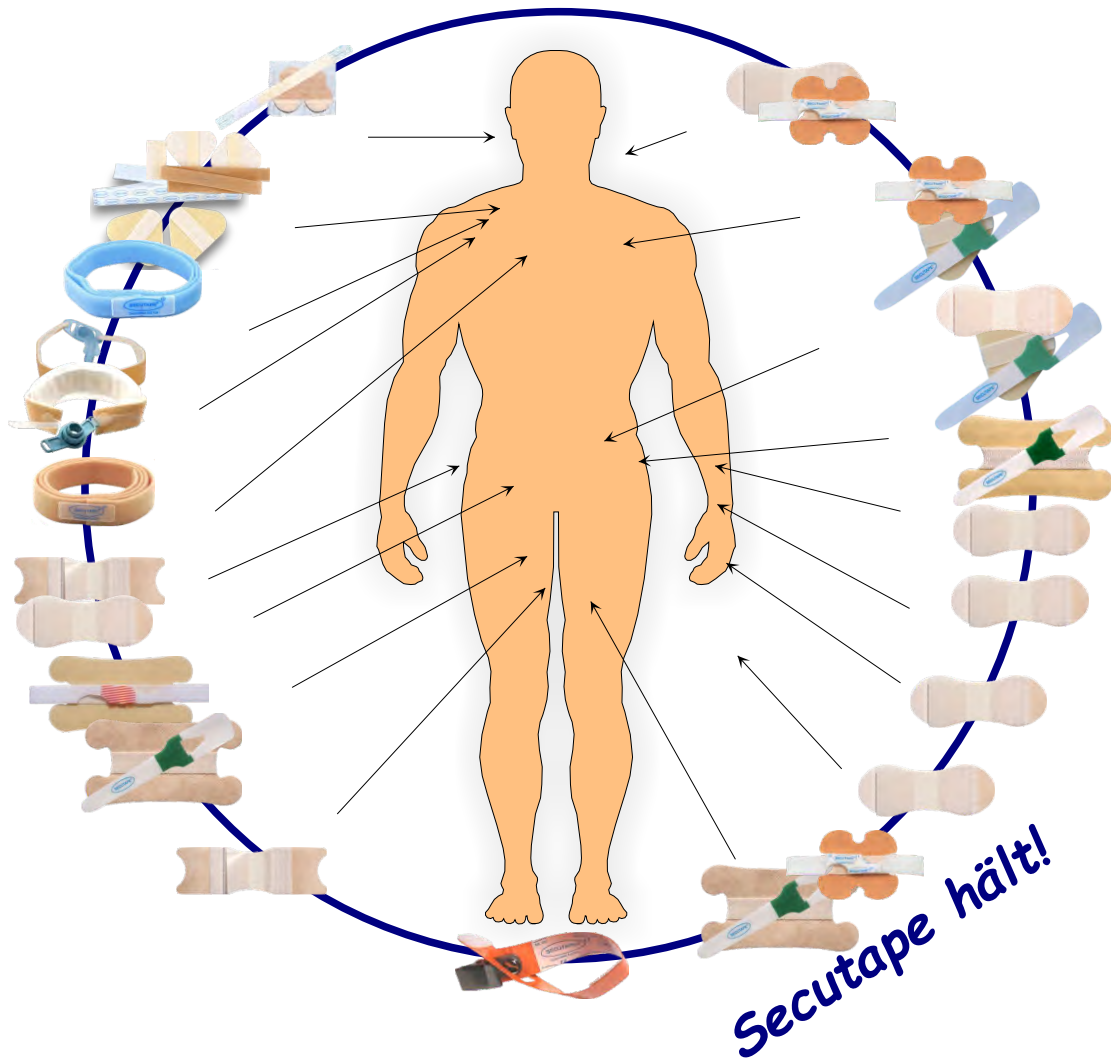

KATALOG

Fixierungen für alle Zu- und Ableitungen am menschl. Körper



TechniMed AG
SWITZERLAND since 1986

Kirchstrasse 54
CH-9400 Rorschach
fon 0041 / 71 844 49 20,

Germany
fon 0800 007 9892
mail: info@technimed.ch

Austria
fon 01/ 440 7979

CE
Made in Germany
© Technimed AG

SECUTAPE®

SECUTAPE bietet seit nunmehr 40 Jahren, praxiserprobte, hochwertige, hautfreundliche und sehr gut haltende Fixierungen für alle Zu- und Ableitungen am menschlichen Körper.

Unsere Idee ein Pflaster auf die Haut zu kleben und darauf eine Lasche aus Klettverschluss und Klebstoff zu befestigen wurde 1986 als erstes unser Patente angemeldet.

Damals, 1986 haben wir die weltweit ersten, in Serie gefertigten Fixierungen herausgebracht.



Unsere SECUTAPE Standardfixierungen 2 und 3.

Sie haben sich seit dem **x-millionenfach bewährt** und sind für viele Anwendungen in den Kliniken Standard geworden.

Nach und nach haben wir weitere innovative Lösungen zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht. Heute bieten wir **spezielle Fixierungen für alle Zu- und Ableitungen** am Körper an.

Wir fertigen unsere Fixierungen in ergonomischen Formen aus **modernen high-Tech Materialien in Deutschland und der Schweiz.**

Durch den Einsatz innovativer, für uns entwickelter Materialien hält SECUTAPE **besser und länger**, was es über den Zeitraum dann auch kostengünstig macht.

Natürlich werden wir kopiert, wir trösten uns damit, dass nur gute Produkte kopiert werden.

Ausserdem bieten wir unseren Kunden **kostenlose, protokollierte Anwenderschulungen**, nach den gesetzlichen Vorgaben*. Sowohl vor Ort als auch über unsere e-learning Plattform.


Und wir sind auch danach noch immer für Sie erreichbar

* Gemäss MedBetreibV EWG 93/42 + MDR 2017/745 EU dürfen Produkte nicht mehr ohne Anwenderschulung eingesetzt werden. Das gilt für alle med. Produkte, auch die der Klasse 1.

Unsere Fixierungen sind in der Regel einzeln verpackt und tragen einen EAN und einen QR-Code. Über den QR-Code haben die Anwender Zugriff auf Schulungsvideos.

In die EU liefern und fakturieren wir aus Deutschland

SECUTAPE Anwendungsbereiche

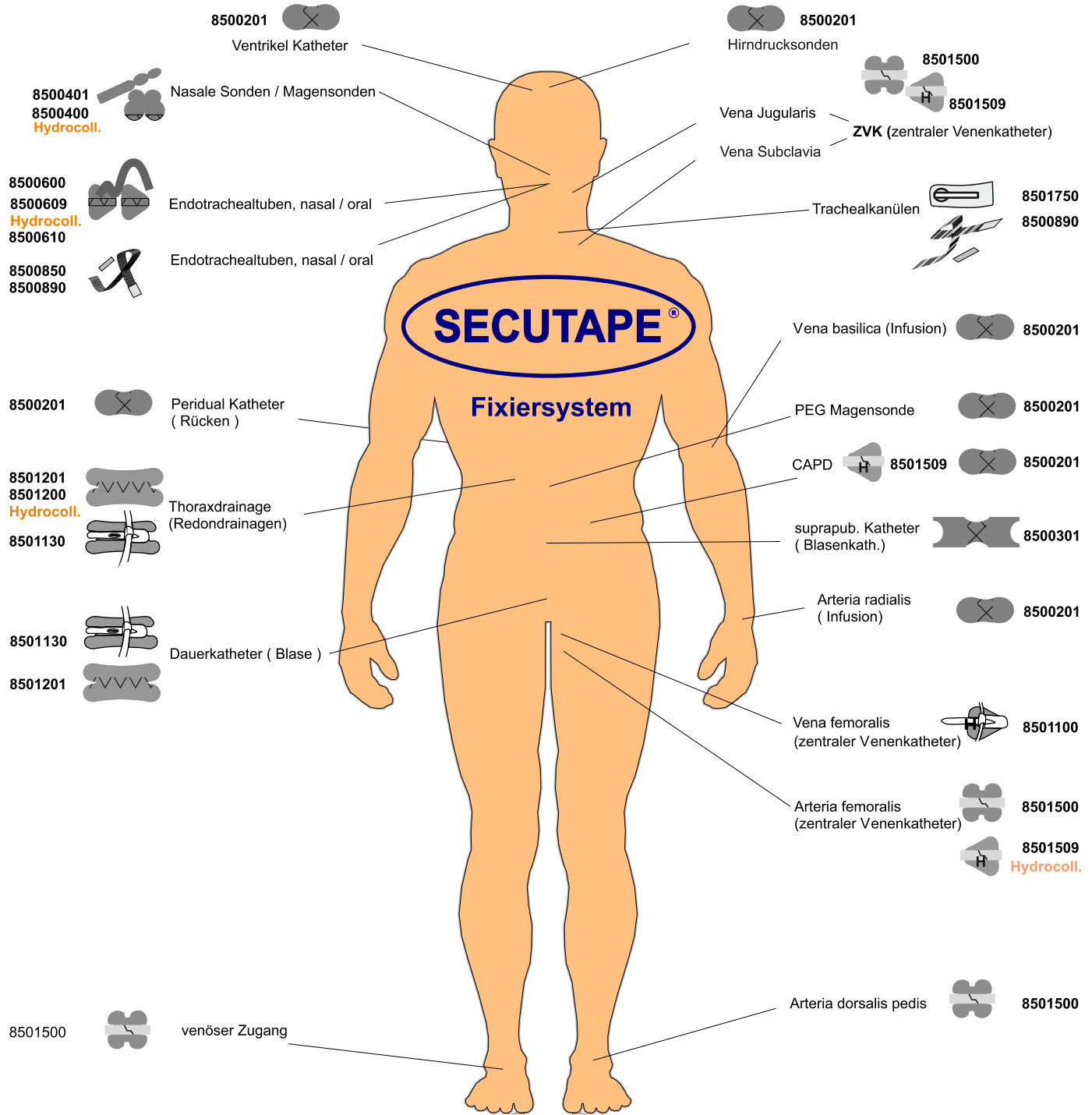

für Schläuche und Leitungen
an Bettwäsche oder Kleidung



8501410





Grösse 2 / 2+ / 3+ Standardfixierung



Anwenden

Die original SECUTAPE Standardfixierungen!

Seit über 35 Jahren millionenfach bewährt.



Die **vielseitig einsetzbaren, sicheren Fixierungen** in ergonomischer Form, sind aus einem atmenden, hochwertigen und **besonders hautverträglichen** Vlies.

Einfach in der Anwendung können sie mehrmals geöffnet und wieder verschlossen werden.

Sie halten **auch wenn sie nass werden**, z.B. wenn der Patient gewaschen wird.

Speziell zur Fixierung von:

PEG, CAPD, ZVK, NFC, Suprapubische Katheter, Infusionen, Urin-Katheter, Redondrainagen, Ports, Wunddrainagen, Sonden zur Druckmessung und allen anderen Leitungen.

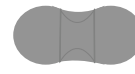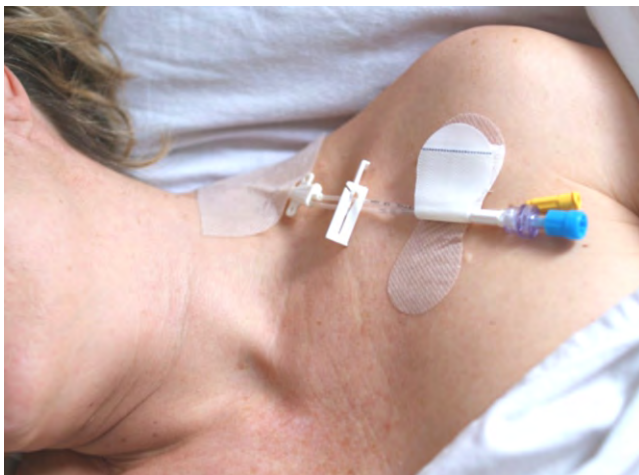

Art. Nr. 8500201

1 VE 200 Stk.

Vliesbasis

Einzelverp.

8 Btl. à 25 Stk.

2+

Art. Nr. 8500211

1 VE 1000 Stk.



20 Btl. à 50 Stk.

9 x 3.5 cm

PZN 18424605



Art. Nr. 8500301

1 VE 200 Stk.

Vliesbasis

Einzelverp.

8 Btl. à 25 Stk.

3+

Art. Nr. 8500311

1 VE 1000 Stk.




20 Btl. à 50 Stk.

15 x 4.5 cm

PZN 18424628

Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 3 - 5 Tage

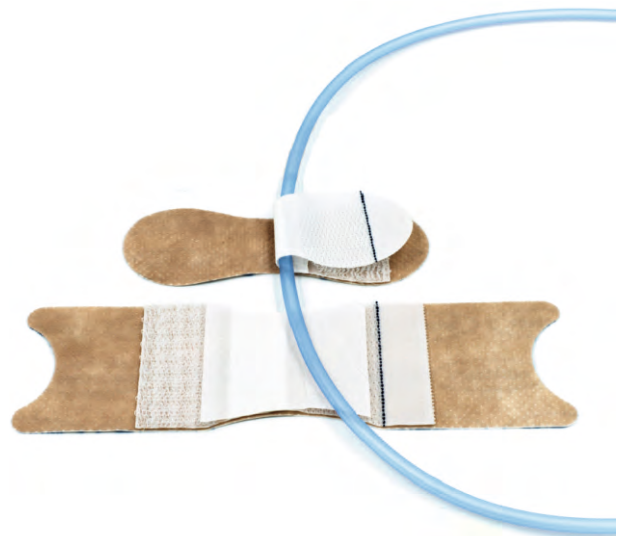

CE

Made in Germany

www.secutape.ch



SECUTAPE Fixierung zur Befestigung von "Schläuchen" und Leitungen, speziell ZVK!!

UNIFIX ist einfach anzuwenden und eignet sich speziell zur **sicheren Befestigung** von dünneren Kathetern, Sonden und Leitungen, z.B. mehrlumige ZVK u.ä..

Die Basis ist ein sehr gut haltender und ergonomisch geformter **Halter aus hautschonendem**, atmendem **Vlies** bzw. Hydrocolloid, **der auch gut hält wenn er nass wird**. Z. B. wenn der Patient gewaschen wird.

Der Katheter wird im Klebstoffbett vom Klettverschluss **sicher gehalten**.
Der Verschluss lässt sich mehrmals öffnen.



Zur Zugentlastung, der z.T. langen Ableitungen, empfehlen wir unser **KROKOFIX**, ein rutschfester, flexibler Halter der an Kleidung und Bettwäsche befestigt werden kann.

Auf diese Weise werden Zug und Bewegungen, z.B. am ZVK verringert, was Entzündungen verhindern hilft.

Krokofix klein Art. Nr. 8501410



Unifix

Art. Nr. 8501500 1 VE 200 Stk.



8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Halter 6 x 6 cm
PZN 19980165



Unifix Hydrocolloid


Art. Nr. 8501509 1 VE 200 Stk.



8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Halter 6.5 x 5 cm
PZN 19980202

Es können mit UNIFIX auch kleinere Teile z.B. Filter, Tansducer o.ä., sicher am Körper befestigt werden.

Liegedauer nach Anwendung:
ca. 3- 6 Tage

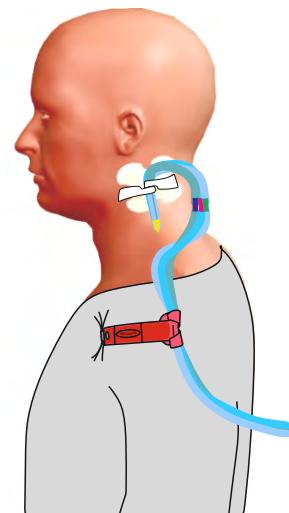



Ein universelles SECUTAPE System für alle Anwendungsbereiche und alle Durchmesser!

Fixieren ohne Klebstoff an Schlauch oder Leitung!
Zuverlässig gehalten durch NANOPLAST®, eine neu entwickelte **Antirutschfolie** mit Gecko Effekt.


Die Fixierung kann beliebig oft geöffnet werden.
 Es bleiben keine Rückstände am Schlauch, die **Fixierung hält immer wieder!**

Den Klettbinder gibt es als Set mit 2 verschiedenen Haltern, auch in Hydrocolloid, für jeden Anwendungsbereich.

Durch die ergonomischen Formen und das hochwertige, atmende und hautschonende Material halten die Fixierungen auch bei häufigem Zug, **selbst wenn sie nass werden!**


Für implantierte **Zu- und Abgänge**, z.B. **VAD Drivelines** und **Blasenkatheter** ist der Klettbinder besonders gut geeignet!

Die NANOPLAST® Folie ist aus Silicon mit ca. 29000 Haftelementen per qcm.

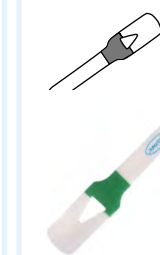

Klettbinder

Art. Nr. 8501000 1 VE 200 St.
 Einzelverp. 8 Btl. a 25 St.
 13.5 x 2.5 cm

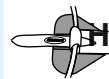


Klettbinder - Set KLEIN Hydrocolloid

Art. Nr. 8501100 1 VE 100 St.
 Einzelverp. 4 Btl. a 25 St.
 Halter 6.5 x 5 cm



PZN 10322957

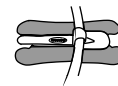

Klettbinder - Set GROSS

Art. Nr. 8501130 1 VE 100 St.
 Einzelverp. 4 Btl. a 25 St.
 Halter 12 x 6.5 cm



PZN 10322992

Liegedauer je nach Anwendung:
 bis 3Tage
 Hydrocolloid - 6 Tage





SECUTAPE Fixierung für dicke "Schläuche". Unsere stärkste !



Das Fixierset ist besonders geeignet für Thoraxdrainagen, ECMO, Spülkatheter, Urinkath. Drivelines, u.ä..

Mit einer Basis aus einem **hautschonenden** und **atmenden Vlies**, oder einem Hydrocolloid, in spezieller, ergonomischer Form, mit einem Klettverschluss.

Der Halter hat eine **Antirutschbeschichtung** die, im Gegensatz zu Klebstoff, **auch Siliconschläuche sicher hält!**

Die einfach anzuwendende Fixierung hält sehr gut, auch wenn sie nass wird, z.B.wenn der Patient gewaschen wird.

Mit Hydrocolloid Basis ideal als Langzeitfixierung.

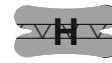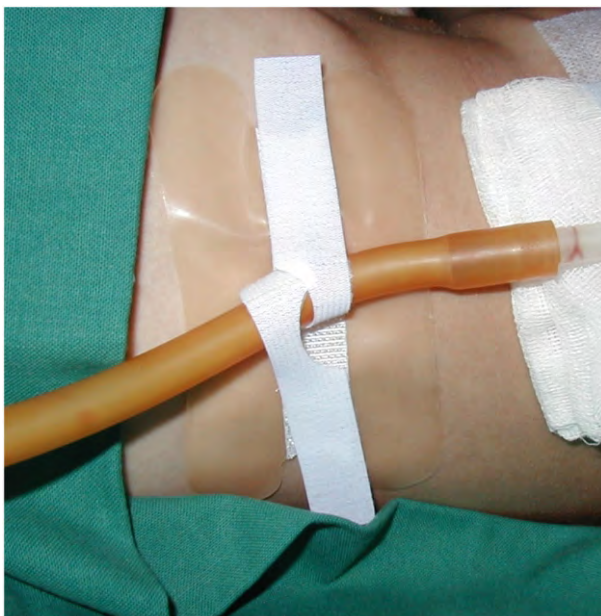

Art. Nr. 8501200

1 VE 100 Stk.

Hydrocolloid


4 Btl. à 25 Stk.

Einzelverp.



Halter 12 x 6.5 cm

PZN 10323017

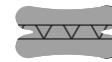

Art. Nr. 8501201

1 VE 100 Stk.

Vlies

4 Btl. à 25 Stk.

Einzelverp.



Halter 12 x 6.5 cm

PZN 4838361

Liegedauer je nach Anwendung:
bis ca. 4 Tage
Hydrocolloid ca. 6 Tage





Patentierte, zweiteilige SECUTAPE Fixierung, für alle nasalen Sonden.

Ein Set aus:

einem ergonomisch geformten Halter mit Klettverschluss. Hergestellt aus einem speziellen, **hautfreundlichen** und atmenden **Vlies** oder einem **Hydrocolloid**.
Sowie einem Haltebändchen mit Klebefläche.


Der Halter bleibt auf der Nase, wenn nötig wird nur das Bändchen gewechselt.

Durch den Klettverschluss lässt sich die Sonde locker befestigen, es entstehen **keine Druckstellen in der Nase**.

Es gibt **auch keine Hautschäden mehr** durch ständiges abreißen der Pflasterstreifen.

Eine aufwändige Hautpflege entfällt damit!

Die einfach anzuwendende Fixierung **hält, auch wenn sie nass wird**, z.B.wenn der Patient gewaschen wird.

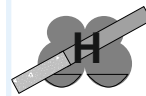

Nasal-Set Hydrocolloid


Art. Nr. 8500400 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Halter 4.4 x 3.5 cm

Bändchen 7.5 x 0.8 cm

PZN 9508013

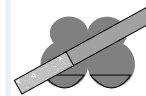

Nasal-Set Vlies-Basis

Art. Nr. 8500401 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Halter 4.4 x 3.5 cm

Bändchen 7.5 x 0.8 cm

PZN 9508036




Nasalhalter Vlies-Basis

Art. Nr. 8500410 1 VE 400 Stk.

Verp. Kärtchen à 4 Stk.
Einzelverp.

Halter 4.4 x 3.5 cm

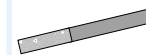

Nasalbändchen

Art. Nr. 8500440 1 VE 500 Stk.

Verp. Kärtchen à 5 Stk.
Einzelverp.

Bändchen 7.5 x 0.8 cm

PZN 19980194



Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 2-3 Tage
Hydrocolloid - 5 Tage



Das Original SECUTAPE Tubus-Fixier-Set! Seit über 35 Jahren millionenfach bewährt.

Zwei Halter aus sehr **gut haftendem, hautschonendem** Vlies oder Hydrocolloid, mit Klettverschluss.

Zusammen mit **Nylonbändern die sich nicht dehnen und keine Feuchtigkeit aufnehmen.**

Die Bänder sind mittig mit einem med. Klebstoff beschichtet, der Kunststoffe nicht angreift!

Das Standardband ist einseitig flauschig.


Das Softband ist hautfarben, doppelseitig flauschig und **besonders weich.**

Die Fixierung lässt sich einfach und von nur einer Person anlegen.

Auch das Absaugen kann von nur einer Person durchgeführt werden.

Das Set ist eine **sehr sichere Fixierung** die, durch die einfache Anwendung, Zeit spart.

Zusätzlich ermöglichen die speziellen Materialien längere Liegezeiten was es dann **auch noch preiswert im Gebrauch macht.**

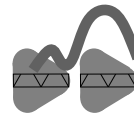

Art. Nr. 8500609

Hydrocolloid



1 VE 100 Stk.
4 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Set




Art. Nr. 8500600


Vlies



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Set

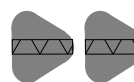

Art. Nr. 8500700

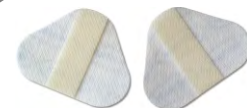

1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
zwei Stk.
Halter 6.5 x 5 cm



Art. Nr. 8500709

Hydrocolloid



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Halter 6.5 x 5 cm



Fixierband
standard

Art. Nr. 8500800



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Band Länge 40cm



Softband
hautfarben

Art. Nr. 8500805



1 VE 200 Stk.
8 Btl. à 25 Stk.
Einzelverp.
Band Länge 40cm

Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3Tage
Hydrocolloid - 5 Tage



SECUTAPE Fixier-Set für Endotrachealtuben. Unser bewährtes Fixier-Set mit einem speziellen Band!

Zwei Halter aus sehr gut haftendem, **hautschonendem**, Vlies mit Klettverschluss.

Dazu ein neuentwickeltes, doppelseitig flauschiges Nylonband, hypoallergen und **mittig geschlitzt**.

Der Tubus lässt sich dadurch noch besser und exakter positionieren!

Das hochwertige Band nimmt **keine Feuchtigkeit auf** und **es dehnt sich auch nicht**.

Am Tubus wird es mit einem high-tech Klettstreifen befestigt. Beim Entfernen bleibt kein Klebstoff am Tubus.

Die sehr **sichere und gut haltende Fixierung** lässt sich von nur einer Person anlegen.

Auch sicheres **Absaugen ist durch nur eine Person möglich**.

Das Set ist eine **sehr sichere Fixierung** die, durch die **einfache Anwendung**, Zeit spart.

Zusätzlich ermöglichen die speziellen Materialien längere Liegezeiten, was es dann **auch noch preiswert im Gebrauch macht**.



Fixier-Set EXTRA

Art. Nr. 8500610 1 VE 200 Stk.
Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.
Band Länge 40cm


Beide Komponenten sind auch einzeln erhältlich.



Fixierband EXTRA

Art. Nr. 8500810 1 VE 200 Stk.
Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.
Band Länge 40cm

Liegedauer je nach Anwendung:
bis 3 Tage

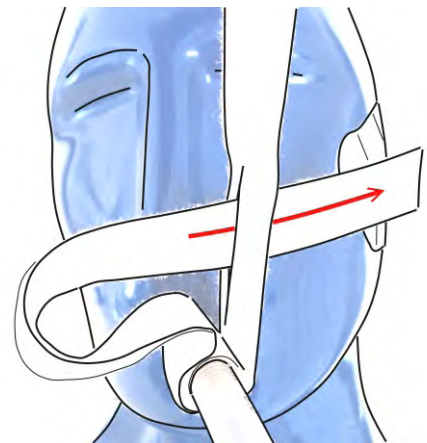



SECUTAPE Tubus-Band SILICON

Patentiertes, weiches Nylonband mit spezieller Beschichtung.

Das Band dehnt sich nicht, nimmt keine Flüssigkeit auf und hat durch die Beschichtung mit med. Silikon keine harten Kanten.

Durch die Beschichtung **verrutscht das Band nicht** auf der Haut und der **Tubus bleibt damit sicher fixiert.**


Man muss das Band nicht straff spannen, so entstehen **keine Hautschäden mehr**, durch Feuchtigkeit oder starken Zug.

Es wird zuverlässig am Tubus gehalten, von einem selbstklebenden speziellen Klettstreifen.

Es bleiben beim Ablösen keine Rückstände.

Einfach in der Handhabung muss das Band wesentlich **weniger oft gewechselt werden** als herkömmliche Schaumstoffbänder.

Modernste Klettverschluss-technik für sicheren Halt.

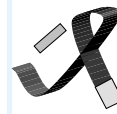

Tubus-Band

Art. Nr. 8500850 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Länge 75 cm



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 2 Tage



SECUTAPE Tubus-Band Silicon 8500850



Kurzzeit-Fixierband selbstklebend für Endotrachealtuben.



Anwenden

SECUTAPE Fixierband zur Kurzzeitfixierung von Endotrachealtuben.

Speziell für den Einsatz in der Anästhesie!

Neu entwickeltes, hochwertiges, **selbstklebendes** Fixierband.

Das Tape-Band klebt hervorragend, ist **reissfest und dehnt sich nicht**.

Hygienisch verpackt, in einer Spenderschachtel, ist es auf Grund seiner Form und des speziell gestanzten Abdeckpapiers **einfach im Handling**.

Die Schachteln sind perforiert und können an der Front geöffnet werden, was die Entnahme und die Aufbewahrung erleichtert.



Kurzzeit-Fixierband

Art. Nr. 8500820 1 VE 400 Stk.

Schachteln a. 100 Stck.

Länge 37cm



Liegedauer je nach Anwendung:
bis 24 Std.

**Das Band ersetzt nicht die
korrekte Langzeitfixierung.**



Made in Germany

www.secutape.ch



Universelles SECUTAPE Band für Endotrachealtuben & Trachealkanülen.

Neu entwickeltes weiches, doppelseitiges Nylonband, hypoallergen und angenehm flauschig. Das Band **dehnt sich nicht** und **saugt sich nicht voll** Flüssigkeit.

Auf Grund seiner Materialeigenschaften muss es **wesentlich weniger häufig gewechselt werden** als herkömmliche Schaumstoff- bzw. Textilbänder.

Es entstehen **weniger Hautschäden** durch Druck und Feuchtigkeit, da man es nicht, wie üblich, straff anlegen muss!

Vielseitig einsetzbare, multifunktionale und sichere Fixierung, geringerer Verbrauch, einfach in der Handhabung.

Ein Produkt für mehr Anwendungen, Sie können z.B. auch eine Leitung, am Bein oder Arm damit befestigen!



Universal-Band

Art. Nr. 8500890 1 VE 200 Stk.
 Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.
 Länge 75 x 2 cm



Liegedauer je nach Anwendung:
 ca. 1 - 2 Tage





SECUTAPE Fixierung ohne kleben, zirkulär für Endotrachealtuben.


Neu entwickelte, doppelseitige Nylonbänder, Hypoallergen und angenehm flauschig. Die Bänder **dehnen sich nicht und saugen sich im Gegensatz zu Schaumstoff nicht voll!**

Das **bewährte, weiche Fixierband** (Softband) ist mittig mit einem med. Klebstoff beschichtet, der um den Tubus gewickelt, diesen sicher hält.

Das breitere, **dickflauschige Halteband**, wird um den Hals gelegt und ergibt in Verbindung mit dem Fixierband eine ausgesprochen **sichere Tubusfixierung**.

Die Fixierung kann bei Patienten **mit Hautschäden problemlos** eingesetzt werden.

Eine sehr gut haltende Fixierung, einfach in der Handhabung, auf Grund der Materialeigenschaften **entstehen keine Druckstellen**.

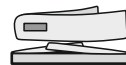

Soft-Set

Art. Nr. 8500900 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Zweiteilig



Softband hautfarben

Art. Nr. 8500805 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. à 25 Stk.

Band Länge 40cm



Liegedauer je nach Anwendung:
ca. 1 - 3 Tage





SECUTAPE Fixierband für Trachealkanülen .

Vorteile durch neue Materialien, eine Grösse für alle!

Weiches Flauschband, doppelseitig aus Nylon, das sich **nicht dehnt und nicht vollsaugt**.



Da es nicht feucht wird, ist es angenehm zu tragen.

Es kann auf Grund seiner Materialeigenschaften länger liegen und muss **weniger häufig gewechselt werden**, als herkömmliche Schaumstoff- oder Textilbänder.

Man muss es nicht straff anlegen, so entstehen **weniger Hautschäden**, durch Druck und Feuchtigkeit,

Das Band ist **einfach anzuwenden** und passt für die meisten Halsweiten, bei Überlänge einfach kürzen.

Weniger Verbrauch, weniger Arbeitsaufwand, weniger Müll.

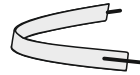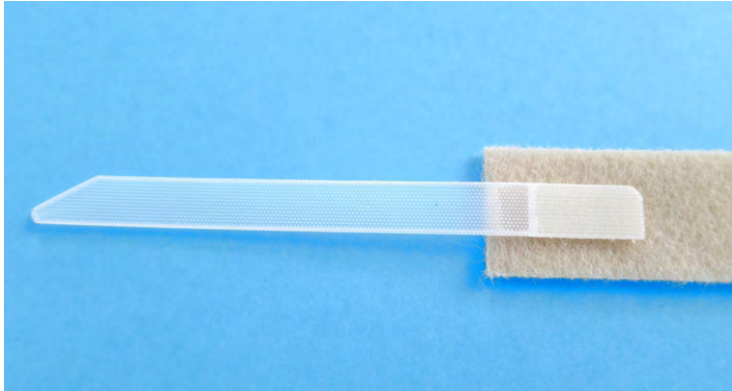

Tracheofix Basic

Art. Nr. 8501710 1 VE 200 Stk.

Einzelverp. 8 Btl. a 25 Stk.

Länge 45 x 2cm

PZN19980219

Hm-Nr.12.99.07.3008



Liegedauer ja nach Anwendung
ca 2 Tage



SECUTAPE Fixierband für Trachealkanülen^{D.B.G.M.}

Vorteile durch neue Materialien und nur eine Grösse !

Dickes weiches, zweiteiliges Superflauschband aus Nylon, das sich **nicht dehnt und nicht voll saugt**.


Es passt für die meisten Halsweiten, bei Überlänge einfach kürzen.

Das Band ist angenehm zu tragen, wird nicht feucht und muss nicht straff angelegt werden.

So entstehen auch weniger Hautschäden, durch Druck und Feuchtigkeit,

Auf Grund seiner Materialeigenschaften kann es erheblich länger liegen, im Gegensatz zu den herkömmlichen Schaumstoff oder Textilbändern muss es **wesentlich weniger häufig gewechselt** werden!

Weniger Verbrauch, weniger Arbeitsaufwand, weniger Müll.

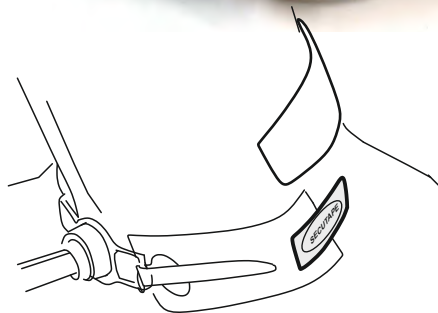

Bei Hautschäden, oder stark schwitzenden Anwendern, empfiehlt sich unser Pad **aus med. Superabsorber**. Es ist selbstklebend und hält den Hals zuverlässig trocken.

Damit lassen sich Hautschäden verbessern bzw. zuverlässig vermeiden!

Ideal zur Langzeitfixierung!



Tracheofix Comfort

Art. Nr. 8501750 1 VE 100 Stk.


Einzelverp. 4 Btl. à 25 Stk.



Länge 50 x 3cm

PZN 16333985

Hm-Nr. 12.99.07.3009

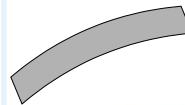

Superabsorber Pad

Art. Nr. 8501770 1 VE 100 Stk.

Einzelverp. 4 Btl. à 25 Stk.



Länge 20 x 4cm

Liegedauer ja nach Anwendung
ca 3 Tage
mit Absorber bis 5 Tage





Verstellbarer SECUTAPE Kopfhalter zur Fixierung einer veno-arteriellen ECMO.

Der **elastische Kopfhalter** aus flauschigem Nylon mit Klettverschlüssen ist auf **jede Kopfgrösse** einstellbar. Er ist in Verbindung mit dem Fixierbändchen und den Hydrocolloidhaltern eine **sehr sichere Fixierung**, die dem Patienten ein **gewisses Mass an Bewegungsfreiheit** lässt.

Das Material **saugt sich nicht voll Feuchtigkeit**, wie z.B. Schaumstoff und **wird deshalb nicht locker**.

Durch die zusätzliche Fixierung der Leitungen am Hals **verringert sich die Belastung an der Austrittsstelle**.

Die im Set enthaltenen Krokofix dienen zur Zugentlastung, der weiteren Ableitung, an der Bettwäsche.

Durch den Einsatz von Klettverschlüssen und Bändern lässt sich das Set an die meisten Situationen anpassen.



Kopfhalter-Set:ECMO

Art. Nr. 8501610, VE 10 Set



Die Fixierhalter und Krokofix sind auch einzeln erhältlich.



Bei SECUTAPE Krokofix rutschen Leitungen nicht durch!

Krokofix ist eine **manuelle, rutschhemmende Befestigung** für Schläuche oder Leitungen aller Art.



Zur sicheren Befestigung von Zu- und Ableitungen **an Kleidung und Bettwäsche**.

Spezielle Streifen aus Antirutschmaterial sorgen für **sicheren Halt der Leitungen!**

Krokofix wird mit **einer Edelstahlklammer an Kleidung oder Bettwäsche** befestigt und ist mit üblichen Mitteln zu desinfizieren.

Zum Einsatz bei mobilen Patienten und oder grosser Zugbelastung.

Krokofix gross wird hauptsächlich für Beatmungsschläuche eingesetzt.

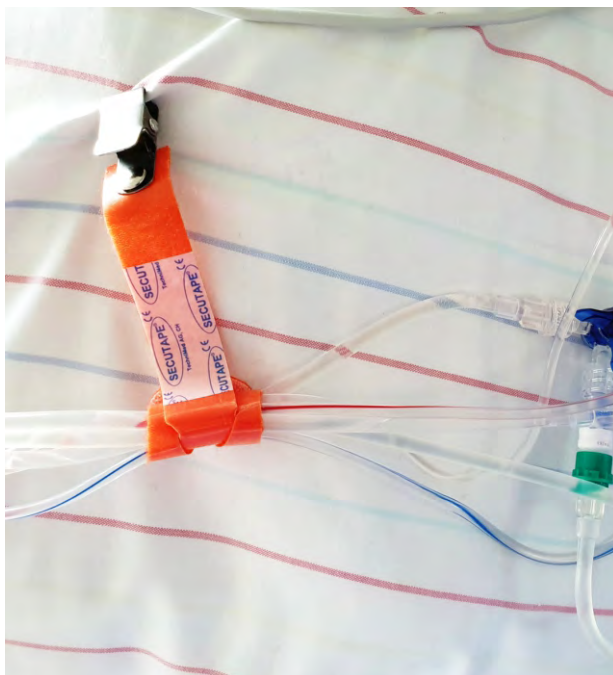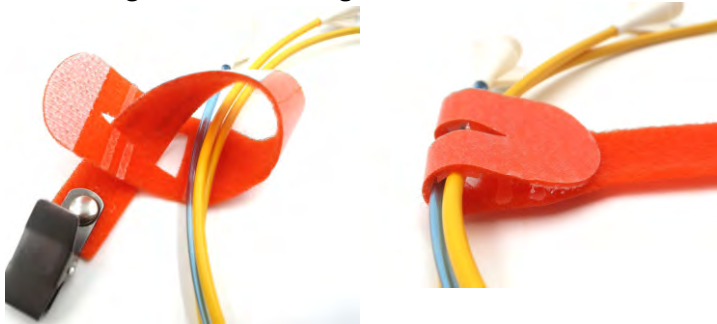


 **Krokofix klein**

Art. Nr. 8501410 1 VE 200 Stk.
8 Beutel zu 25 St.



16.5cm

PZN 19980142

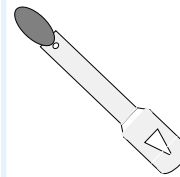


Krokofix gross

Art. Nr. 8501420 1 VE 200 Stk.
8 Beutel zu 25 St.




23 cm

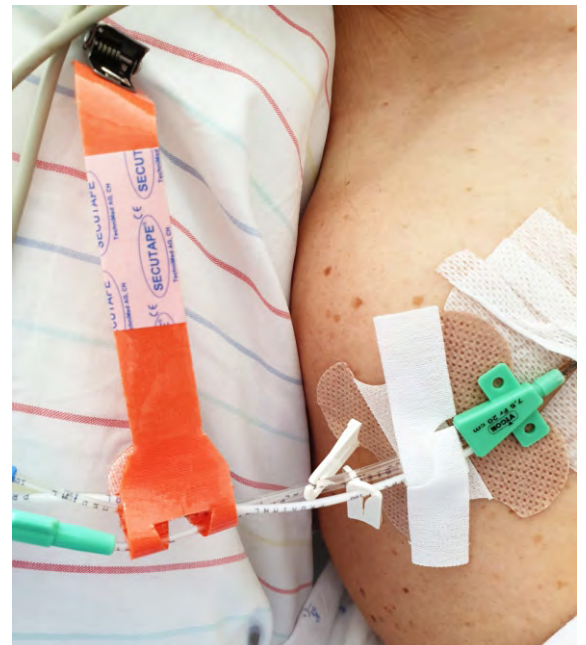



**FIXIERUNG
FIXATION
FISSAGGIO**

lieber sicher SECUTAPE

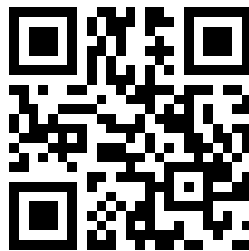

www.secutape.ch